

מפרט טכני:

צג: כל הנתונים מוצגים בזמן הפעלה

טווח מדידה: 3-180 ק"ג

דיוק מדידה: 100 גרם

יחידות: ק"ג/פאונד/סטון (בצג LCD) או ק"ג/פאונד (בתצוגת LED)

חיווי סוללה חלשה

חיווי עומס יתר: עומס יתר של יותר מ-2.5 ג, סה"כ 182.5 ק"ג, בצג יופיע "Err"

טמפרטורת עבודה מומלצת: 10-60 מעלות צלזיוס

סביבת לחות:  $RH\% \geq 90$

יישומון

הוראות שימוש ליישומון LEAONE עבור משקל חכם מבית VO2

#### שקילה מיידית

פתחו את יישום LEAONE ואת חיבור הבלוטות', היכנסו אל תוך ממשק "לוח המכוונים" ("Dashboard"). עלו על המשקל ומצאו את אפשרות מכשיר "לא מותאם" ("No paired"), ולחצו על "התאם" ("to pair"). אחרי סיום השקילה, הנתונים יסונכרו עם היישום. אם קישור הבלוטות' מנותק, נתוני השקילה יישמרו בזיכרון המשקל, ואז יסונכרו עם היישומון כשיהיה חיבור בלוטות' בין השניים.

---

#### הקלדת נתוני השקילה ליישומון של המשקל החכם מבית VO2

המשתמש יכול להקליד נתוני שקילה אל תוך היישומון כדי לעקוב אחריהן בעתיד.

---

#### לוח מכוונים

ממשק לוח המכוונים מציג מידע לגבי משקל המשתמש ובני המשפחה, מייצר דוח נתונים ועצות בריאותיות בהתבסס על המדידה. בממשק מוצגים נתוני בני משפחה, שאלות נפוצות והגדרות שונות.

---

#### מגמת משקל

כולל דוח שבועי, דוח חודשי ודוח רבעוני, כולל שינויי משקל, מוצגים על גבי גרפים.

שימו לב : סקלת שומן הגוף באמצעות בלוטות' נעשית על ידי ניתוח 12 נתונים. שומן, מים, שומן בטני, שרירים, עצמות BMI, BMR, משקל, חלבון, השמנת יתר, גיל הגוף, BLM.

### הגדרת המשקל החכם

הפעלת המשקל החכם כוללת שני חלקים : הגדרת המשקל והגדרת התקשורת מול המשקל

הגדרת המשקל

ניהול התהליכים של "סנכרון" המשקל כוללים התאמה וביטול התאמה של הבלוטות'.

ניהול קישור

כולל אינדיקציית סטאטוס בלוטות' וקישור בלוטות'

---

### חשבון ומשתמש

כולל את ניהול החשבון וניהול המשתמש

ניהול חשבון

כולל רישום, התחברות, שינוי סיסמה, שכחתי סיסמה, קישור לדוא"ל, פייסבוק, LinkedIn, אינסטגרם ועוד.

ניהול משתמש

ניהול מידע משתמש, כולל שם כינוי, יום הולדת, גובה, מין ועוד. ניהול גם של חשבונות בני המשפחה ומידע לגביהם (תחת אותו חשבון משתמש).

---

אזהרות :

- יש להרחיק את המשקל מאזורים רטובים. אין להשתמש במשקל אם הזכוכית רטובה. הדבר עלול לגרום להחלקה.
- למניעת התהפכות, יש לעמוד במרכז המשקל.

3. משטח המשקל עשוי זכוכית. יש להרחיק ממנו חפצים חדים או קשים שעלולים לשרוט אותו. אין להפעיל עליו כוח מופרז או לחשוף אותו לזעזועים פתאומיים או נפילות לא צפויות העלולים לשבור את הזכוכית ולפצוע את המשתמש.
4. משקל הבלוטות אינו עמיד למים. יש לשמור על סביבה יבשה. אין להטביל את המכשיר במים ואין להשתמש ו/או לאחסן את המשקל בחדר האמבטיה.
5. יש להשתמש במטלית רכה (מגבון) כדי לנקות את פני שטח המשקל. יש להרחיק מהמכשיר ממיסים אורגניים וכימיקלים למיניהם.
6. כשחיווי סוללה חלשה נדלק, יש להוציא את הסוללות מהמשקל למניעת דליפת סוללות שתפגע בו ולהתקין סוללות חדשות.

שימו לב:

1. יש לעמוד על המשקל ברגליים יחפות ובכיוון הנכון.
2. למדידת שומן גוף, יש לעמוד על המשקל 10 שניות לפחות.
3. אשרו את נתוני המין, גובה ותאריך השקילה.

## משקל בלוטות' חכם

**צעד 1** בדקו את המפרט הנדרש מהטלפון או הטאבלט


לפני התקנת יישומון LEAONE, בדקו האם הטלפון או הטאבלט עומדים בדרישות הבאות:

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>אייפון 4, אייפון S4, אייפון 5, אייפון C5, אייפון S5, אייפון 6, אייפון 6 פלוס, אייפון S6, אייפון S6 פלוס, אייפון 7, אייפון 7 פלוס, אייפון 8, אייפון 8 פלוס, אייפון X, אייפד טאץ' 5, אייפד 3, אייפד 4, אייפד אייר, אייפד אייר 2, אייפד מיני, אייפד מיני 2, אייפד מיני 3.</p> | <div data-bbox="1098 1462 1190 1570" data-label="Image"> </div> <p>תאימות למערכת הפעלה IOS 7.0 ומעלה עם קישור בלוטות' 4.0 ומעלה.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

סמסונג : גלקסי S5, גלקסי S4, גלקסי S3, גלקסי  
נוט 4, גלקסי נוט 3, גלקסי נוט 2, גלקסי גרנד 2.  
XIAOMI : XIAOMI4, XIAOMI Note, XIAOMI3, XIAOMI2/2s  
HUAWEI : Ascend P8, Ascend P7, Honor 6Plus, Honor 6, Mate7, Ascend  
אם אתם משתמשים בגרסת אנדרואיד חדשה  
יותר מ-5.1, יש לעמוד בדרישות כדי לאפשר את  
הגדרות המיקום.


תאימות למערכת הפעלה אנדרואיד 4.3 ומעלה  
עם קישור בלוטות' 4.0 ומעלה.

תאימות למערכת הפעלה אנדרואיד 4.3 ומעלה במכשירי אנדרואיד נבחרים עם קישור  
בלוטות' 4.0 ומעלה.

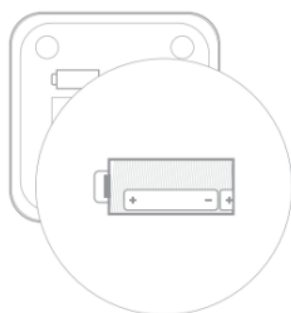

## צעד 2 התקנת הסוללות

- 1/- פתחו את כיסוי הסוללה
- 2/- התקינו את הסוללות בכיוון הנכון
- 3/- סגרו את הכיסוי

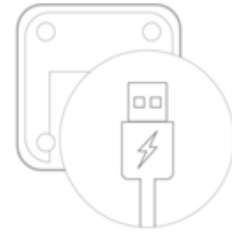

במשקל עם טעינת USB  
תוכלו לטעון את המשקל באמצעות  
ה-USB לפני שהסוללה נגמרת

---

### צעד 3 התקנת היישום

הפעלת בלוטות'  
הטלפון או הטאבלט מתחברים לרשת (ווי-פיי, 3G או 4G)  
השתמשו במכשיר כדי לסרוק קוד QR או לחפש את יישומון "LEAONE" בחנות  
היישומים/גוגל פליי והתקינו אותו.  
עבור מערכות iOS עבור מערכות אנדרואיד



For Android



For iOS



חנות היישומים





גוגל פליי

---


#### צעד 4 רישום ומידע משתמש מלא

פתחו את יישומון Leaone, הירשמו עם הדוא"ל שלכם, הכניסו שם כינוי, מין, גיל, גובה, ומידע אישי מלא ומדויק.  
ניתן לפתוח מספר פרופילים בהתאם למספר המשתמשים שמגדרים ביישומון.

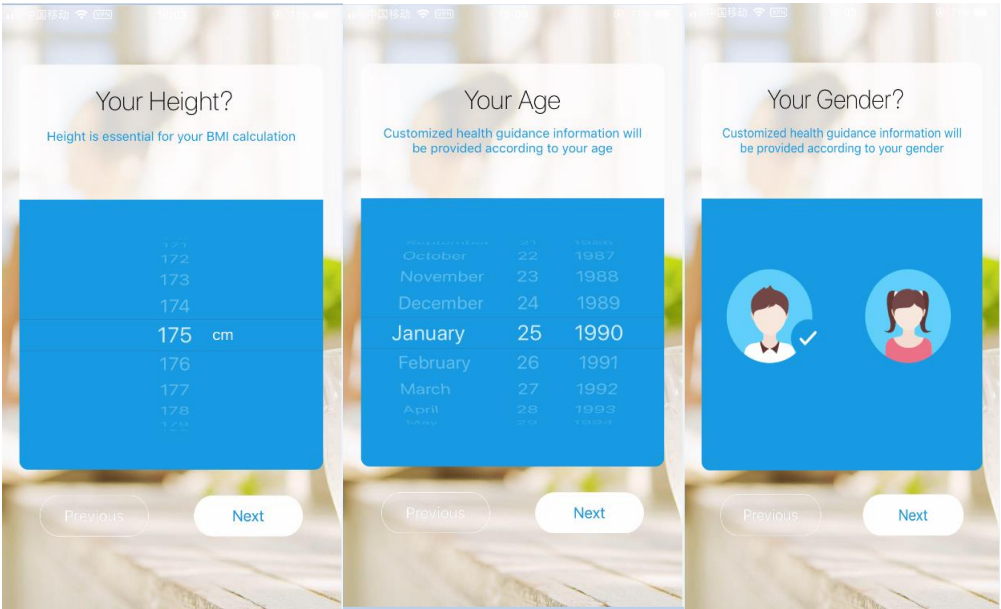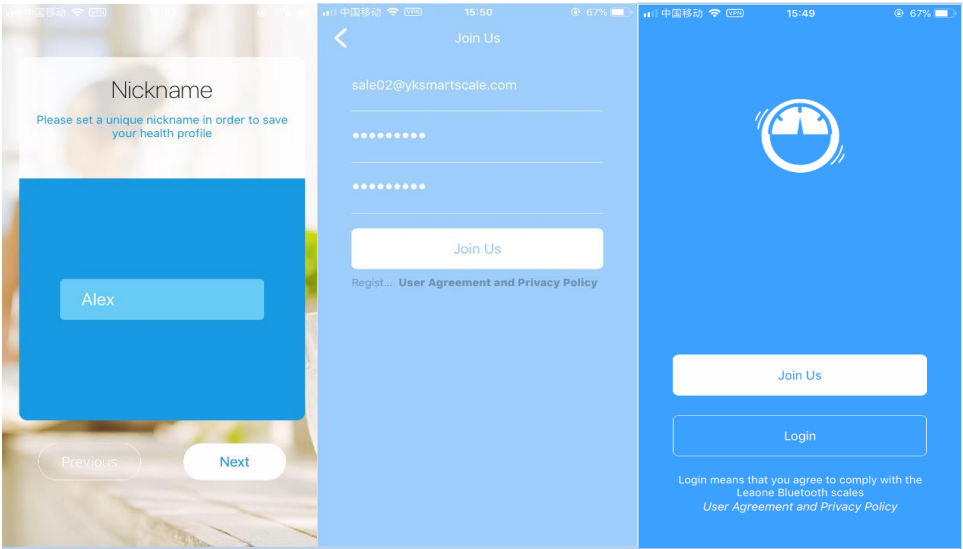


## צעד 5 שקילה

היכנסו אל תוך ממשק "לוח המכוונים" ("Dashboard"). עמדו על המשקל, ופתחו את ממשק הבלוטות'. חפשו והקליקו כדי "לתאם" את המשקל עם הנייד או הטאבלט. המתינו לסנכרון השקילה עם יישומון LEAONE.

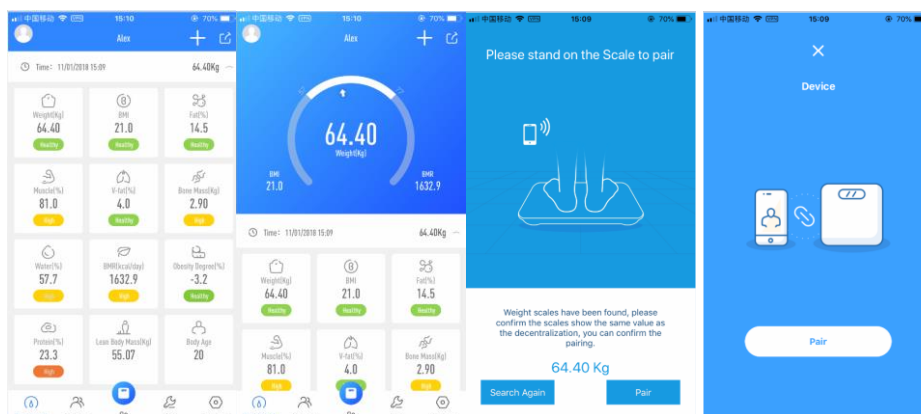

## צעד 6 צפו בתוצאות הבדיקה, ושתפו נתונים במגוון דרכים.

לחצו על כל אחד מהנתונים כדי לצפות בנתונים העדכניים ובנתוני העבר.

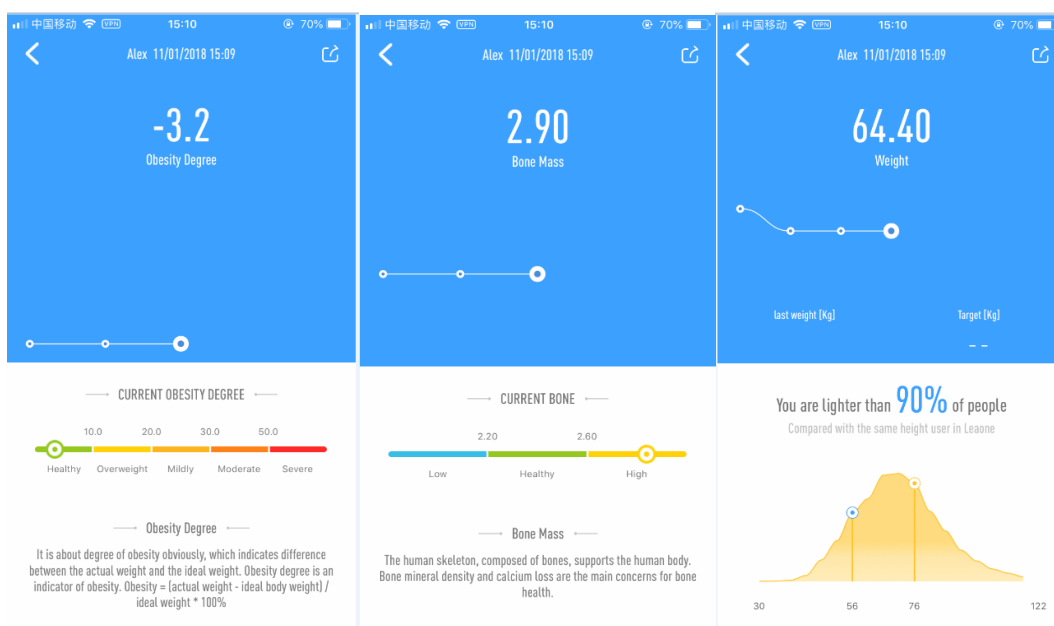

דרכים שונות לשיתוף נתוני השקילה.

